

Самый простой привод мешалки со шкалой

Гибкая муфта
Компенсирует отклонение конструкции от вертикали

Втулка для мешалки
Вал мешалки может быть 8, 10 или 16 мм (подбирается)

Зажимные клипсы
Фиксируют соединения реактора, чтобы случайно не открывали

Перемешивающий элемент якорного типа (стеклянный)

Крепежное кольцо LF100
Позволяет крепить небольшие емкости (до 1 л) к штативу

Терморубашка
Изолированное от продукта пространство, по которому циркулирует теплоноситель.

Донный слив (стеклянный)
Возможно изготовление GL для работы с пластиковым ершом (как для термостата)

Ерш для шлангов термостата (на базе GL-крепления)

Донный клапан (без мертвого объема)
Ширина открытия отверстия зависит от степени откручивания



Капельная (дозировочная) воронка

Циркуляционный термостат


Гибкая муфта
Компенсирует отклонение конструкции от вертикали

Конденсатор спиралевидный

Вал перемешивающего элемента (металл)

Стенд «стульчик»

Угловой адаптер 135°C

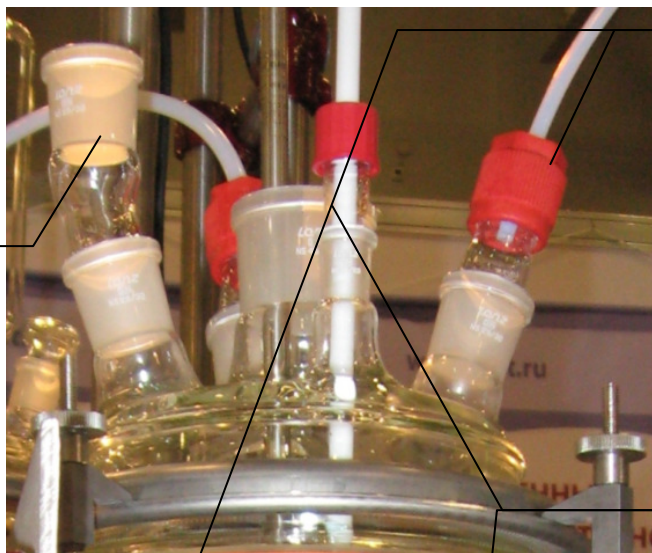


Крепление шланга от насоса (н-р, для подачи реагентов с помощью насоса)

Крепление датчика температуры



Крепежное кольцо LF150

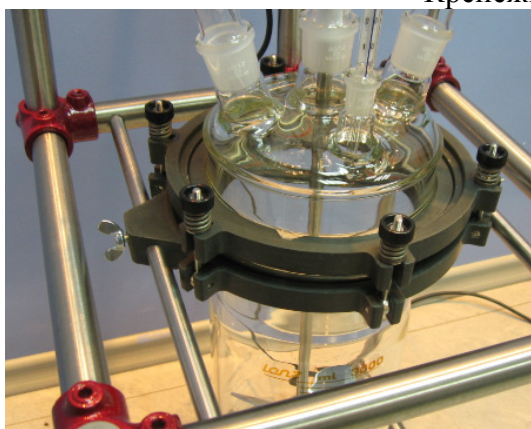

вариант 1



Вариант 2